

Käyttöohje



Vastuuvapauslausekkeet

CountAir® laskee vain inhalaattorissa jäljellä olevien inhalaatioiden määrän.

CountAir® ei vaikuta inhalaattorin toimintaan eikä annoksen hengittämiseen vaadittavaan voimaan.

CountAir® on lääkinällinen laite.

CountAir® on rekisteröity tavaramerkki.


Suosittelemme, että säilytät CountAir®-pakkauksen. Pakkauksessa oleva viitenumero tarvitaan mahdollista reklamaatiota varten.

Tarkistuspäivä: marraskuu 2023

Jos CountAirin® kanssa on sattunut vakava vaaratilanne, ilmoita siitä välittömästi sekä valmistajalle että kansallisille viranomaisille.



Spruyt hillen bv, Venkelbaan 101,
2908 KE Capelle aan den IJssel,
The Netherlands
www.countair.com

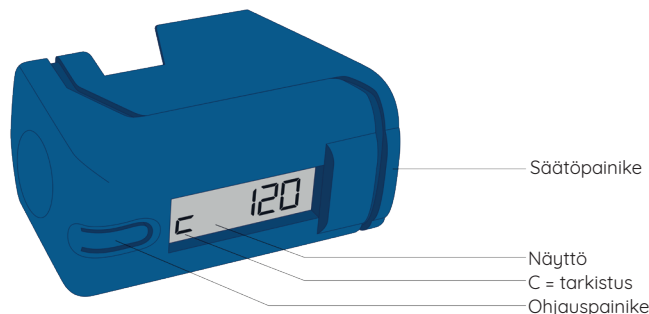


Mikä on CountAir®?

CountAir® on lääkinällinen laite. Se on kehitetty erityisesti COPD- ja astmapotilaille jotka käyttävät annosaerosolia jossa ei ole sisäänrakennettua annoslaskuria. Tällä hetkellä käyttämäsi lääkettä sisältävää laitetta kutsutaan annosaerosoliksi. Sitä kutsutaan usein myös inhalaattoriksi.

CountAir® laskee inhalaattorissasi jäljellä olevien annosten määrän. CountAir® laskee alaspäin.

Käytä yhtä CountAir®-laitetta yhden inhalaattorin kanssa kerrallaan.

Voidaan käyttää yhdessä alla olevan kaltaisten annosaerosolien kanssa. Päivitetyn tilanteen näet skannaamalla QR-koodin.

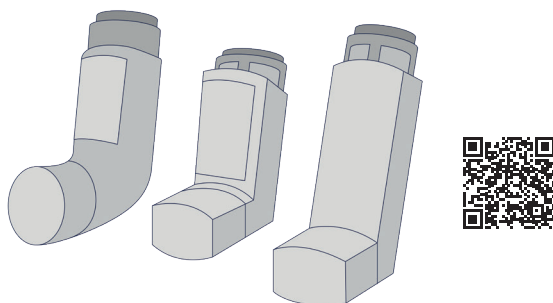


1 CountAirin® käyttöönotto

CountAirissa® ei ole päälle- tai poiskytkentäpainiketta vaan se on valmis käyttöön välittömästi käyttöönottoimenpiteiden jälkeen.

Katso annosten määrä inhalaattoripakkauksesta tai inhalaattorista. Muista tämä lukema.

Jos CountAirin® näyttö on päällä, odota 10 sekuntia, jotta se sammuu

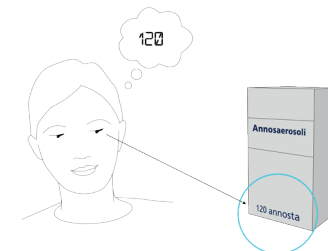

Vaihe 1

Pidä CountAirin® säätöpainiketta painettuna alas.

Vaihe 2

Paina ohjauspainiketta kerran. Näet nyt numeroiden vaihtuvan näytöllä. Nämä luvut ovat 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 ja 220.

Vaihe 3


Vapauta säätöpainike, kun oikea määrä (inhalaattorissa oleva annosten lukumäärä) tulee näytölle. Olet nyt tehnyt CountAirin® käyttöönottoimenpiteet.

Vaihe 4


Voit painaa ohjauspainiketta tarkistaaksesi, että oikea numero on asetettu. Tarkista, että C-kirjain on näytön vasemmassa reunassa. Näin voit olla varma, että tulkitset CountAirin® oikein. Jos käyttöönottoimenpiteet eivät onnistuneet, toista yllä olevat vaiheet.

Voit tehdä käyttöönottoimenpiteet CountAirille® milloin tahansa. Tämä on mahdollista myös silloin, kun jäljellä oleva annosmäärä näkyy näytöllä.

Oletusarvoisesti CountAir® on asetettu oikeakätisille käyttäjille. Näyttö voidaan kääntää myös vasenkätiseksi. Odota, kunnes näyttö on tyhjä. Paina ohjauspainiketta ja pidä se painettuna alas. Paina sitten säätöpainiketta kerran, kunnes näyttö kääntyy 180 astetta.



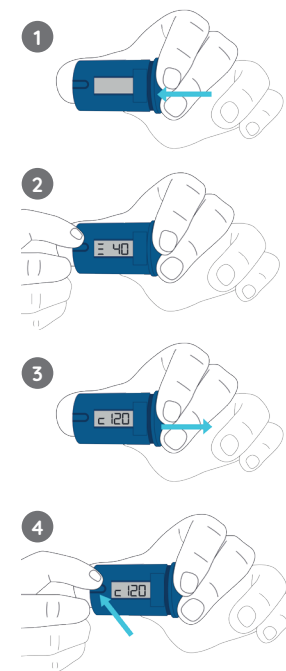


2 Inhalaattorin asettaminen paikoilleen

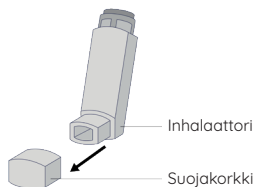

Irrota inhalaattorin suojakorkki ja aseta inhalaattori CountAiriin®.

Tarkista, että inhalaattorisi on kiinnitetty kunnolla CountAir®-laitteeseen, ja aseta suukappaleen suojakorkki takaisin paikalleen.

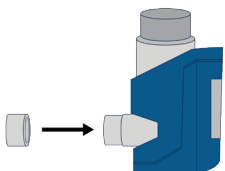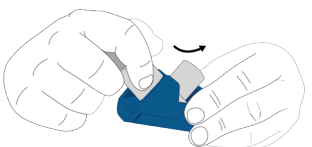
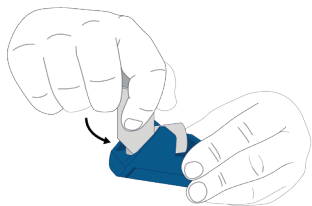


3 Valmis käytettäväksi

Inhalaattorisi on nyt valmis käytettäväksi apteekkihenkilökunnan, lääkärin tai sairaanhoitajan ohjeiden mukaisesti. Noudata inhalaattorikohtaisia käyttöohjeita, joissa voidaan esimerkiksi ohjeistaa ravistamaan inhalaattoria ennen käyttöä tai vapauttamaan kolme suihketta ilmaan.

Jos käytät tilanjatketta, voit jatkaa sen käyttöä entiseen tapaan

Inhaloinnin jälkeen näet näytöllä 10 sekunnin ajan, kuinka monta annosta on jäljellä. Tämän voit tarkistaa myös painamalla ohjauspainiketta.

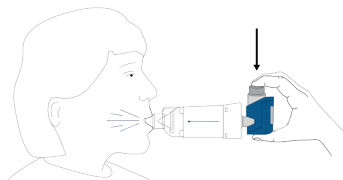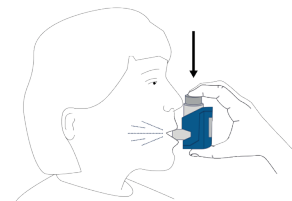


4 Inhalaattorin vaihto

Jokaisen painalluksen jälkeen CountAir® laskee alaspäin, kunnes ennalta asetettu määrä annoksia on käytetty. Tämän jälkeen näytölle ilmestyy neljä viivaa vierekkäin ja inhalaattori on vaihdettava.




Poista inhalaattorin suojakorkki ennen inhalaattorin poistamista CountAirsta®.

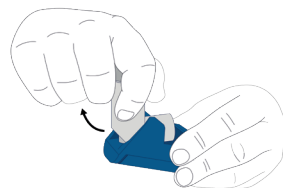

Voit nyt tehdä käyttöönottoimenpiteet uudestaan kohdissa 1-4 esitetyllä tavalla. Tarkista huolellisesti onko annosten määrä sama kuin edellisellä kerralla, vai onko sinulla käytössä toisenlainen inhalaattori jossa on eri määrä annoksia.


5 Kuinka säilyttää CountAiria® ja inhalaattoria

CountAir® on aina käyttövalmis, kun inhalaattori on asetettu paikalleen. Säilytä CountAiria® inhalaattorin kanssa esimerkiksi pussissa. Tämä auttaa estämään CountAirin® ja inhalaattorin likaantumisen tai niiden aktivoitumisen vahingossa.

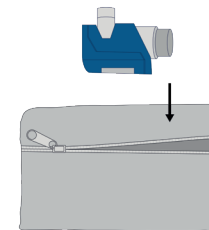

Puhdistusohjeet

Puhdista CountAir® tarvittaessa kostealla liinalla. HUOM! Älä huuhtelee vedellä, koska CountAir® ei ole vedenpitävä.

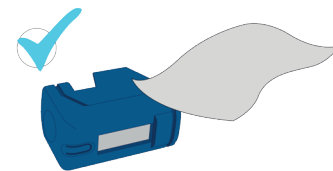

Pariston käyttöaika

Pariston käyttöaika on keskimääräisellä käytöllä noin kaksi vuotta.

Kun paristo on melkein tyhjä, näytölle tulee kaksi pystysuoraa viivaa.



CountAir® on nyt vaihdettava. Pariston tyhjentyessä on mahdollista, että CountAir® ei enää näytä oikeaa jäljellä olevien annosten määrää.

Paristo ei ole vaihdettavissa. Voit palauttaa CountAirin® elektroniikkajätteenä paikallisten ohjeiden mukaisesti.

