


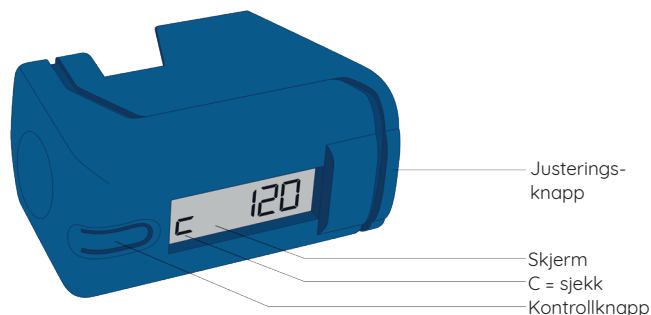

Ansvarsfraskrivelse

CountAir® teller bare antall inhalasjoner som gjenstår i en sprayinhalator.

CountAir® påvirker ikke drift av sprayinhalatoren og påvirker ikke den kraften som kreves for å inhalere en dose.

CountAir® er et medisinsk utstyr.

CountAir® er et registrert varemerke.

Vi anbefaler at du beholder emballasjen til CountAir®. Referansenummeret på emballasjen er nødvendig hvis du vil rapportere en klage.

Revisjonsdato: november 2023

Hvis det har skjedd en alvorlig hendelse med CountAir®, rapporter dette umiddelbart til både produsenten og de nasjonale myndighetene.



Spruyt hillen bv, Venkelbaan 101,
2908 KE Capelle aan den IJssel,
The Netherlands
www.countair.com


Hva er CountAir®?

CountAir® er et medisinsk utstyr spesielt utviklet for KOLS- og astmapasienter som bruker en støvelformet sprayinhalator uten innebygd dosemåler. En doseraerosol er inhalatoren med medisinen du for øyeblikket bruker. Den omtales ofte som en sprayinhalator.

CountAir® teller antall inhalasjoner du har igjen i sprayinhalatoren. CountAir® teller ned.

Bruk en CountAir® per sprayinhalator.

Kan brukes i kombinasjon med følgende sprayinhalatorer: skann QR-koden for en oppdatert oversikt.

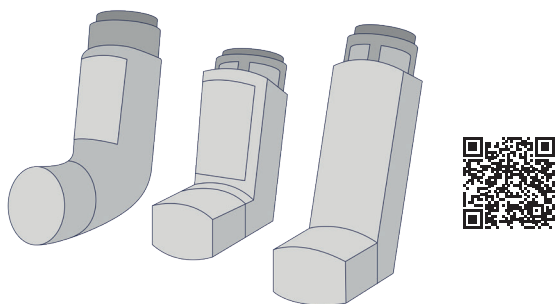


1 Still inn CountAir®

CountAir® har ingen på- eller av-knapp og er umiddelbart klar til bruk etter innstillingen.

Merk nøye antall inhalasjoner på emballasjen eller på sprayinhalatoren din. Husk dette antallet.

Hvis CountAir®-skjermen er på, vent 10 sekunder til den slår seg av.

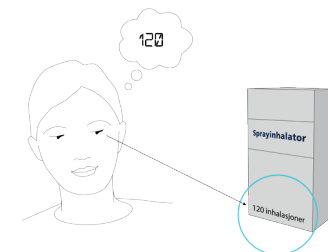

Trinn 1

Trykk og hold nede CountAir®-justeringsknappen.

Trinn 2

Trykk nå på kontrollknappen en gang. Du vil nå se tall som passerer på skjermen. Disse tallene er 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220.

Trinn 3


Slipp justeringsknappen når riktig antall (antall inhalasjoner) vises på skjermen. Du har nå stilt inn CountAir®.

Trinn 4


Du kan nå trykke på kontrollknappen for å bekrefte at riktig antall er stilt inn. Sjekk at bokstaven C vises til venstre på skjermen. Da kan du være sikker på at du leser CountAir® riktig. Hvis du ikke lyktes, gjenta de overstående trinnene.

Du kan stille inn CountAir® når som helst, selv om et gjenværende antall inhalasjoner vises på skjermen.

Som standard er CountAir® innstilt for høyrehendte brukere. For venstrehandte kan skjermen vises motsatt. Dette er enkelt å endre. Vent til skjermen er tom. Trykk nå og hold nede kontrollknappen. Trykk nå på justeringsknappen en gang til skjermen roteres 180 grader.



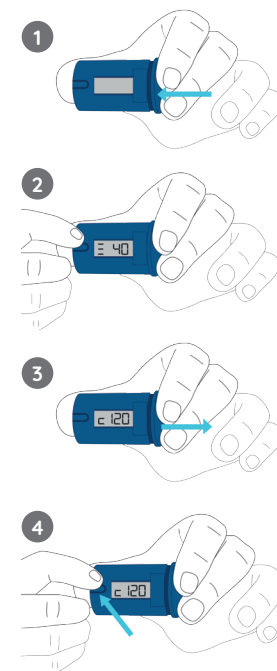


2 Plassering av spray-inhalatoren

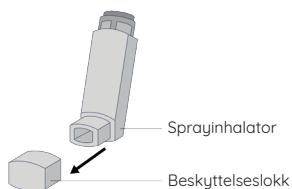

Ta av beskyttelseslokket fra sprayinhalatoren din og sett sprayinhalatoren i CountAir®.

Sjekk at sprayinhalatoren din er riktig festet i CountAir® og sett tilbake beskyttelseslokket på munnstykket.

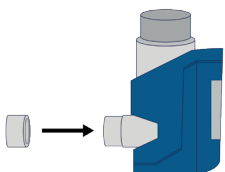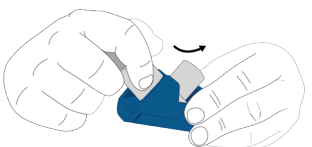
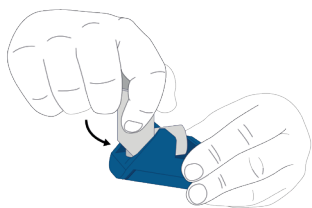


3 Klar til bruk

Sprayinhalatoren din er nå klar til bruk i henhold til instruksjonene fra apotekpersonalet, legen din eller sykepleieren. Merk eventuelle instruksjoner for sprayinhalatoren din som sier at den skal ristes før bruk eller om tre doser skal trykkes ut i luften før bruk.

Hvis du bruker en inhalasjonskammer/spacer, kan du bruke den som vanlig.

Etter at du har tatt en inhalasjon, vil du deretter se på skjermen i 10 sekunder hvor mange inhalasjoner som er igjen. Du kan også trykke på kontrollknappen for å se hvor mange inhalasjoner som er igjen.

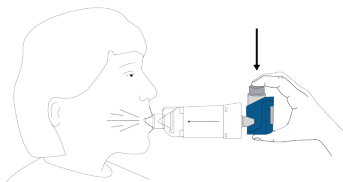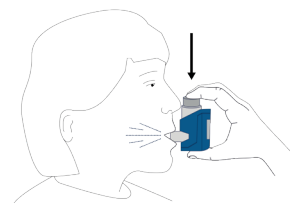


4 Bytte av spray-inhalator

Etter hver inhalasjon teller CountAir® ned til sprayinhalatoren er tom, og det er ingen inhalasjoner igjen. Fire streker vil da vises ved siden av hverandre på skjermen, og sprayinhalatoren må byttes ut.




Fjern beskyttelseslokket fra sprayinhalatoren og fjern den fra CountAir®.

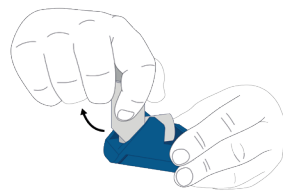

Du stiller nå inn antallet inhalasjoner igjen som nettopp forklart (se trinn 1 til 4). Sjekk nøye om antallet inhalasjoner er det samme som sist, eller om du nå kan ha en annen sprayinhalator med et annet antall inhalasjoner.



5 Hvordan lagre CountAir® med sprayinhalator på en trygg måte

CountAir® er alltid klar til bruk etter at sprayinhalatoren er plassert, og vil ikke bli blokkert i akutte situasjoner. Dette er et bevisst valg. I tilfelle en eventuell nødsituasjon er CountAir® klar for deg. Oppbevar CountAir® med sprayinhalatoren, for eksempel, i en pose. Dette forhindrer forurensning eller uønsket aktivisering av CountAir® og sprayinhalatoren.

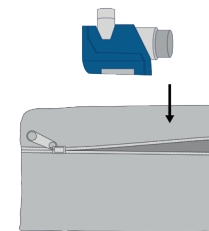

Rengjøringsinstruksjoner

Rengjør CountAir® ved behov med en fuktig klut. OBS! Vask ikke med vann, da CountAir® ikke er vanntett.

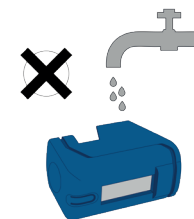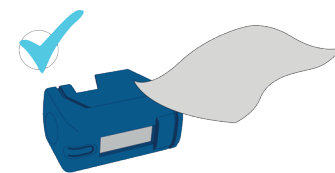

Batteriets levetid

Batteriet varer i ca. to år med gjennomsnittlig bruk.

Når batteriet er nesten tomt, vises to vertikale streker på skjermen.



Det er nå på tide å bytte ut CountAir®. Ellers risikerer du at CountAir® ikke lenger viser riktig antall gjenværende inhalasjoner.

Batteriet er ikke utskiftbart. Du kan returnere CountAir® som elektronisk avfall til kommunen din.

