

Användar-manual



Ansvarsfriskrivningar

CountAir® räknar endast antalet inhalationer som återstår i en sprayinhalator.

CountAir® påverkar inte driften av sprayinhalatorn och påverkar inte den kraft som krävs för att andas in en dos.

CountAir® är ett medicintekniskt hjälpmedel.

CountAir® är ett registrerat varumärke.


Vi rekommenderar att du behåller förpackningen till CountAir®. Referensnumret på förpackningen krävs om du vill rapportera ett klagomål.

Revisionsdatum: November 2023

Om en allvarig incident har inträffat med CountAir®, rapportera detta omedelbart till både tillverkaren och de nationella myndigheterna.



Spruyt hillen bv, Venkelbaan 101,
2908 KE Capelle aan den IJssel,
The Netherlands
www.countair.com

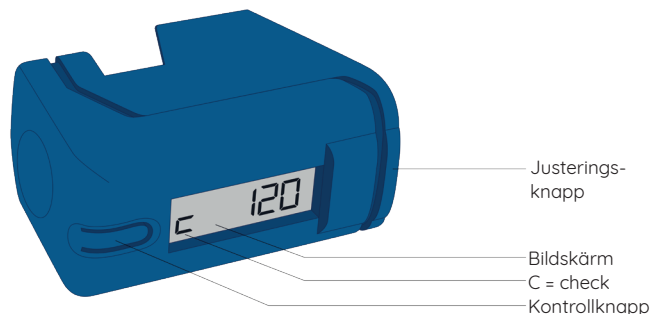


Vad är CountAir®?

CountAir® är ett medicintekniskt hjälpmedel speciellt utvecklad för KOL- och astmapatienter som använder en stövelformad sprayinhalator som saknar inbyggd dosräknare. En dosaerosol är inhalatorn med läkemedel som du för närvarande använder. Det benämns ofta som en sprayinhalator.

CountAir® räknar antalet inhalationer som du har kvar i din sprayinhalator. CountAir® räknar ner.

Använd en CountAir® per sprayinhalator.

Kan användas i kombination med följande sprayinhalatorer: skanna QR-koden för en uppdaterad översikt.

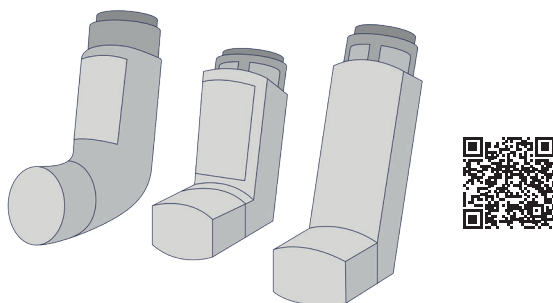


1 Ställ in CountAir®

CountAir® har ingen på- eller av-knapp och är omedelbart klar att användas efter inställningen.

Notera noga antalet inhalationer på förpackningen eller på din sprayinhalator. Kom ihåg detta antal.

Om CountAir®-skärmen är på, vänta 10 sekunder tills den stängs av.

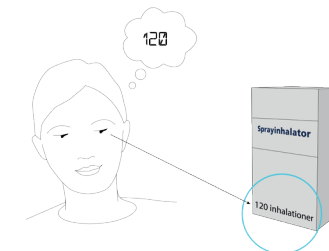

Steg 1

Tryck och håll ned CountAir®-justeringsknappen.

Steg 2

Tryck nu på kontrollknappen en gång. Du kommer nu att se siffror som passerar på skärmen. Dessa siffror är 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220.

Steg 3

Släpp justeringsknappen när rätt antal (antal inhalationer) kommer in i bilden. Du har nu ställt in CountAir®.


Steg 4

Du kan nu trycka på kontrollknappen för att kontrollera att rätt antal har ställts in. Kontrollera att bokstaven C finns till vänster på skärmen.


Då kan du vara säker på att du läser CountAir® korrekt. Om du inte lyckades, upprepa ovanstående steg.

Du kan ställa in CountAir® när som helst. Även om ett återstående antal inhalationer visas på skärmen.

Som standard är CountAir® inställd för högerhänta användare. För vänsterhänta kan skärmen visas tvärt om. Detta är enkelt att ändra. Vänta tills skärmen är tom. Tryck nu och håll ned kontrollknappen. Tryck nu på justeringsknappen en gång tills skärmen roteras 180 grader.



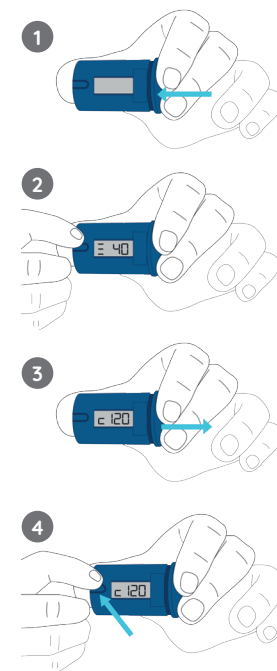


2 Placering av sprayinhalatorn

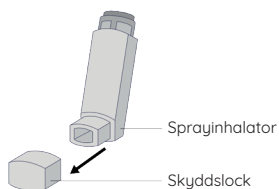

Ta av skyddslocket från din sprayinhalator och sätt sprayinhalatorn i din CountAir®.

Kontrollera att sprayinhalatorn är ordentligt fastsatt i CountAir® och sätt tillbaka skyddslocket på munstycket.

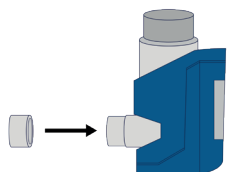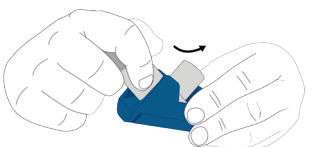
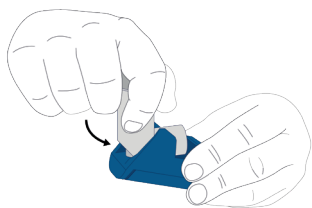


3 Klar att användas

Din sprayinhalator är nu klar för bruk enligt instruktioner från din apotekspersonal, läkare eller sjuksköterska. Notera eventuella instruktioner för din sprayinhalator som säger att den ska skakas före användning eller om tre doser ska tryckas av i luften före användning.

Om du använder en inhalationskammare/ spacer kan du använda den som vanligt.

När du har tagit en inhalation ser du sedan på skärmen i 10 sekunder hur många inhalationer som finns kvar. Du kan också trycka på kontrollknappen för att se hur många inhalationer som finns kvar.

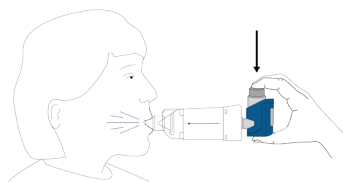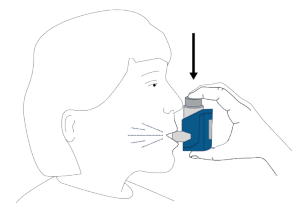


4 Utbyte av sprayinhalator

Efter varje inhalation räknar CountAir® ner tills sprayinhalatorn är tom och det inte finns några inhalationer kvar. Fyra streck kommer då att visas bredvid varandra på skärmen och sprayinhalatorn måste då bytas ut.






Ta bort skyddslocket från sprayinhalatorn och avlägsna det från CountAir®.

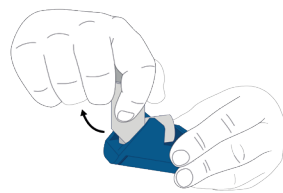

Du ställer nu in antalet inhalationer igen som just förklarats (se steg 1 till 4). Kontrollera noga om antalet inhalationer är detsamma som förra gången eller om du nu kan ha en annan sprayinhalator med ett annat antal inhalationer.

5 Hur du förvarar CountAir® med sprayinhalator på ett säkert sätt

CountAir® är alltid redo att användas efter att sprayinhalatorn har placerats och kommer inte att blockeras i akuta situationer. Detta är ett medvetet val. Vid en eventuell akutsituation är CountAir® redo för dig. Förvara CountAir® med sprayinhalatorn i, till exempel, en påse. Detta förhindrar kontaminering eller oönskad aktivering av CountAir® och sprayinhalatorn.

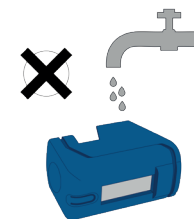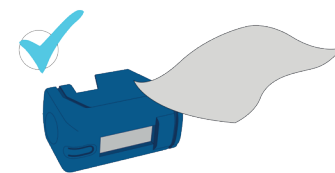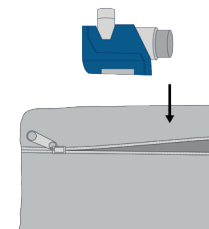

Rengöringsinstruktioner

Rengör vid behov CountAir® med en fuktig trasa. OBS! Tvätta inte med vatten eftersom CountAir® inte är vattentät.

Batteriets livslängd

Batteriet håller i ca två år vid en genomsnittlig användning.

När batteriet nästan är slut visas två vertikala streck på displayen.

Det är nu dags att byta ut CountAir®. Annars riskerar du att CountAir® inte längre visar rätt antal inhalationer som återstår.

Batteriet är inte utbytbart. Du kan returnera CountAir® som elektroniskt avfall till din kommun.

